

Wywoływarka Horizon®

Instrukcja czyszczenia

Zestaw do czyszczenia wywoływarki Horizon zawiera dwa rodzaje ściereczek nasączonych alkoholem, przeznaczone do czyszczenia różnych elementów suchej wywoływarki wielonośnikowej Horizon. W niniejszej instrukcji technicznej opisano procedurę stosowania ściereczek do czyszczenia.

Opisywaną procedurę czyszczenia należy wykonywać w ramach regularnej konserwacji i zawsze, gdy wystąpi zauważalne pogorszenia jakości obrazu lub wydajności wywoływania. Zalecany harmonogram konserwacji oraz tabele rozwiązywania problemów można znaleźć w *Podręczniku użytkownika wywoływarki Horizon* lub w *podręczniku Podstawy obsługi wywoływarki Horizon*.

Niektórzy użytkownicy wywoływarki Horizon mogą, zamiast używać ściereczki czyszczącej do PLATEN ROLLER (WAŁKA), czyścić rolki chwytające za pomocą kasety do czyszczenia wywoływarki Horizon. Kasetę czyszczącą wywoływarki Hirozon, nr katalogowy SP-00279, można zamówić u przedstawiciela firmy Codonics.

Czyszczenie termicznej głowicy drukującej i wałka

1. Nacisnąć przycisk **MENU** na wywoływarce.

Zostanie wyświetlone menu główne.

2. Wybrać opcję Open Top Cover (Otwórz pokrywę górną).

Praca wywoływarki zostanie wstrzymana i po odczekaniu maksymalnie minuty w celu ostudzenia wewnętrznych elementów górna pokrywa odskoczy, częściowo się otwierając.


3. Całkowicie otworzyć górną pokrywę.

OSTRZEŻENIE: Gdy pokrywa wywoływarki jest otwarta, można dotykać tylko części wewnętrznych oznaczonych kolorem zielonym (za wyjątkiem rolek chwytających). Należy zdjąć pierścionki, krawat, biżuterię i inne podobne elementy ubioru oraz związać włosy z tyłu, tak aby nie wpadły do wywoływarki ani nie zostały w niej uwięzione.

Jeśli włożona jest taśma kolorowa, przejść do kroku 4. W przeciwnym razie przejść do kroku 7.

4. Wyjąć kolorową taśmę w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.

Uwaga: Gdy taśma znajduje się poza wywoływarą, należy chronić ją przed kurzem i zabrudzeniami. Należy unikać odkładania taśmy na stół — ładunki elektrostatyczne przyciągną kurz z blatu stołu.

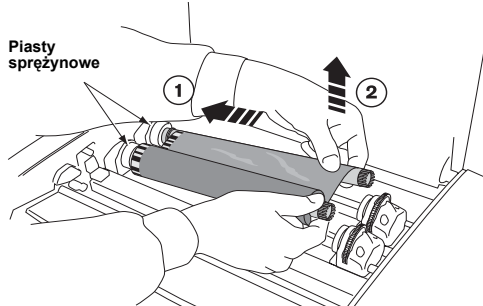


5. Z menu Open Top Cover (Otwórz pokrywę górną) wybrać opcję menu Move Ribbon Carriage (Przesuń karetkę taśmy).

6. Nacisnąć przycisk **▼**, aby odsunąć karetkę taśmy tak, by nie przeszkadzała.
7. Zlokalizować listwę drukującą i oprawę przedstawione na poniższym rysunku.


PRZESTROGA: Aby uniknąć uszkodzenia termicznej głowicy drukującej:

- Do czyszczenia używać wyłącznie ściereczki czyszczącej oznaczonej PRINT HEAD (GŁOWICA DRUKUJĄCA).
- Nie dotykać szklanej powierzchni termicznej głowicy drukującej palcami; zalecane jest nakładanie rękawiczek.

OSTRZEŻENIE: Termiczna głowica drukująca może być gorąca!

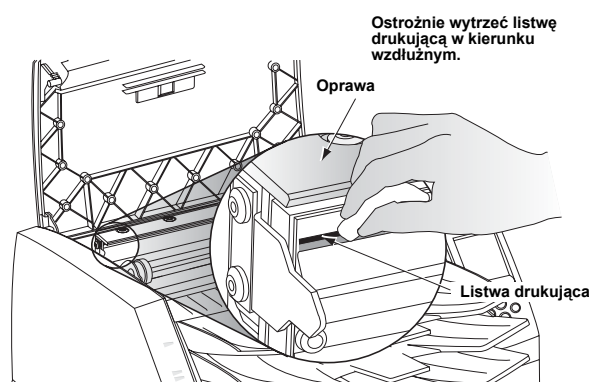

8. Za pomocą ściereczki czyszczącej PRINT HEAD (GŁOWICA DRUKUJĄCA) dostarczonej z zestawem do czyszczenia wywoływarki ostrożnie wytrzeć listwę drukującą na całej długości, wykonując ruch tam i z powrotem z umiarkowanym naciskiem. Ściereczka czyszcząca może się odbarwić. Wycierać tam i z powrotem, dopóki listwa drukująca nie będzie całkowicie czysta.
9. Usunąć pył lub inne zanieczyszczenia z oprawy.
10. Patrząc z boku wywoływarki, zlokalizować pomarańczowy lub biały wałek i prowadnicę podawania, przedstawione na poniższym rysunku.

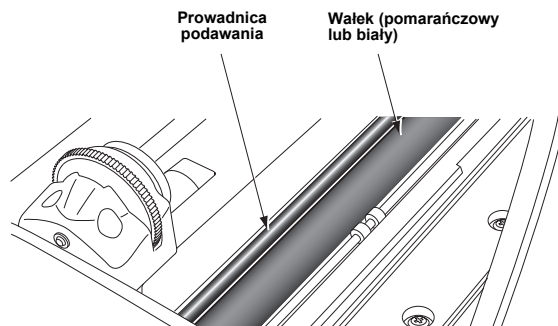

11. Jeśli wyświetlone jest menu Move Ribbon Carriage (Przesuń karetkę taśmy), nacisnąć przycisk **◀**, aby powrócić do menu Open Top Cover (Otwórz pokrywę górną).
12. Z menu Open Top Cover (Otwórz pokrywę górną) wybrać opcję menu Rotate Platen (Obróć wałek). Wyświetlone zostanie menu Rotate Platen (Obróć wałek).

- Ściereczką czyszczącą do PLATEN ROLLER (WAŁKA) dostarczoną z zestawem do czyszczenia wywoływarki wycierać tylko w jednym kierunku wzdłuż całego wałka, od jednego końca do drugiego, aż do usunięcia wszystkich widocznych zanieczyszczeń.

Naciskać przyciski ▲ lub ▼ w celu stopniowego obracania wałka, co pozwoli na wyczyszczenie całej jego powierzchni.


PRZESTROGA: Do czyszczenia PLATEN ROLLER (WAŁKA) używać wyłącznie ściereczki czyszczącej do wałka. Użycie ściereczki czyszczącej PRINT HEAD (GŁOWICA DRUKUJĄCA) może spowodować uszkodzenie wałka.

- Usunąć pył lub inne zanieczyszczenia z prowadnicy podawania za pomocą ściereczek czyszczących do PLATEN ROLLER (WAŁKA) lub PRINT HEAD (GŁOWICY DRUKUJĄCEJ) dostarczonych z zestawem do czyszczenia wywoływarki.
- Pozostawić termiczną głowicę drukującą i wałek do całkowitego wyschnięcia.

PRZESTROGA: Przed próbą uruchomienia wywoływarki termiczna głowica drukująca musi być całkowicie wyschnięta. Dopuszczenie do nagrzania wilgotnej głowicy spowoduje jej uszkodzenie.

W razie potrzeby ponownego włożenia taśmy kolorowej przejść do kroku 16. W przeciwnym razie przejść do kroku 18.

- Z menu Open Top Cover (Otwórz pokrywę górną) wybrać opcję menu Move Ribbon Carriage (Przesuń karetkę taśmy). Nacisnąć przycisk ▲, aby przesunąć karetkę taśmy do góry, dzięki czemu możliwe będzie ponowne włożenie taśmy kolorowej.
- Ponownie włożyć kolorową taśmę w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.

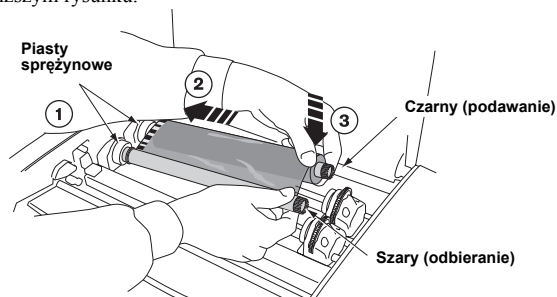


- Zamknąć pokrywę górną.


Czyszczenie rolek chwytających

- Nacisnąć przycisk PAUSE i odczekać, aż wywoływarka przejdzie w stan wstrzymania.
- Wyjąć tace odbiorcze w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.

OSTRZEŻENIE: Po wyjęciu tacy odbiorczych można dotykać tylko części wewnętrznych oznaczonych kolorem zielonym (za wyjątkiem rolek chwytających). Należy zdjąć pierścionki, krawat, biżuterię i inne podobne elementy ubioru oraz związać włosy z tyłu, tak aby nie wpadły do wywoływarki ani nie zostały w niej uwięzione.

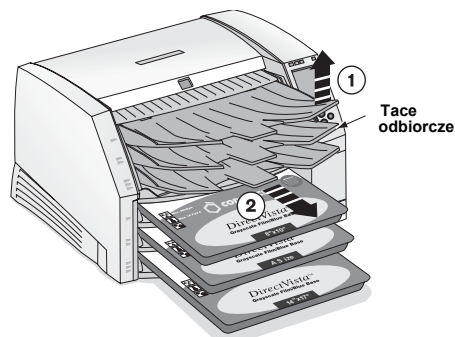


- Umieścić tace odbiorcze na płaskiej powierzchni w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.

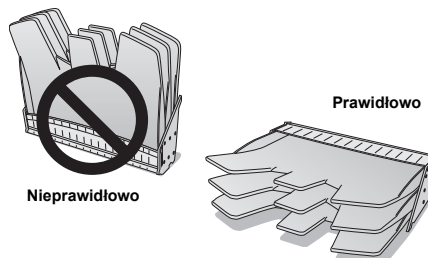

- Wyjąć kasetę ze szczeliny podawania.
- Zlokalizować rolki chwytające.

W urządzeniu znajdują się trzy chwytaki, po jednym dla każdej szczeliny podawania. Najwyższy chwytak przedstawiony został na poniższym rysunku.

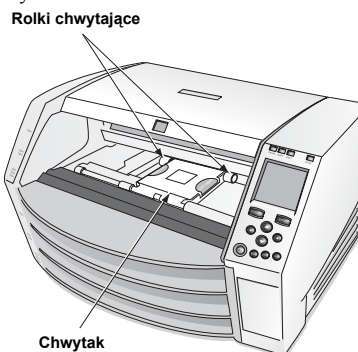

- Za pomocą ściereczki czyszczącej do PLATEN ROLLER (WAŁKA) dostarczonej z zestawem do czyszczenia wywoływarki wytrzeć każdą rolkę chwytającą na całym obwodzie. Ściereczka czyszcząca może się odbarwić.

PRZESTROGA: Nie dotykać rolki czyszczącej palcami; tuszcz z palców; tuszcz z palców jest bardzo trudny do usunięcia i może spowodować uszkodzenie rolek. Używać wyłącznie ściereczki czyszczącej oznaczonej PLATEN ROLLER (WAŁEK); użycie ściereczki czyszczącej PRINT HEAD (GŁOWICA DRUKUJĄCA) może spowodować uszkodzenie.

- Pozostawić rolki do całkowitego wyschnięcia.
- Ponownie włożyć tace odbiorcze i wyjąć kasetę.



17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 (faks)
E-mail info@codonics.com
www.codonics.com

Codonics Limited KK
New Shibaura Bldg. F1
1-3-11, Shibaura
Minato-ku, Tokyo, 105-0023 JAPONIA
Telefon: 81-3-5730-2297
Faks: 81-3-5730-2295