

Codonics farebný papier


S viac dnešných lekárskejších systémov pomocou farebných aplikácií, codonics vedie priemysel s našimi chromavista® farebný papier

"Pracujeme s Neurologie skupinou, ktorá bola nadšená, keď videli, ako naše britva-ostre farebné štúdie na papieri

môže byť pohodlne pošmykol do pacientových grafov. Doslova zmenila svoju prax. "

John C. Litchney, MBA, RT, administrátor pre kliniku Cleveland, Katedra regionálnej rádiológie

- Codonics exkluzívne lekárske farby zodpovedajúce (MCM™) zaisťuje, že výtlačky zodpovedajú jemným kopírovaním monitorov
- Ideálne pre odkazujúce lekárov a pacientov vziať-domy
- Špeciálne navrhnuté pre lekárske aplikácie, Codonics farebný papier je FDA schválený a plne archivovateľné
- Kvalita obrazu je oveľa lepšia ako laser a kancelárske tlačiarne
- Predstavujeme 16 700 000 farieb
- Jediný farebný výstup v priemysle, ktorý skutočne súperí konvenčné farebné fotografický film

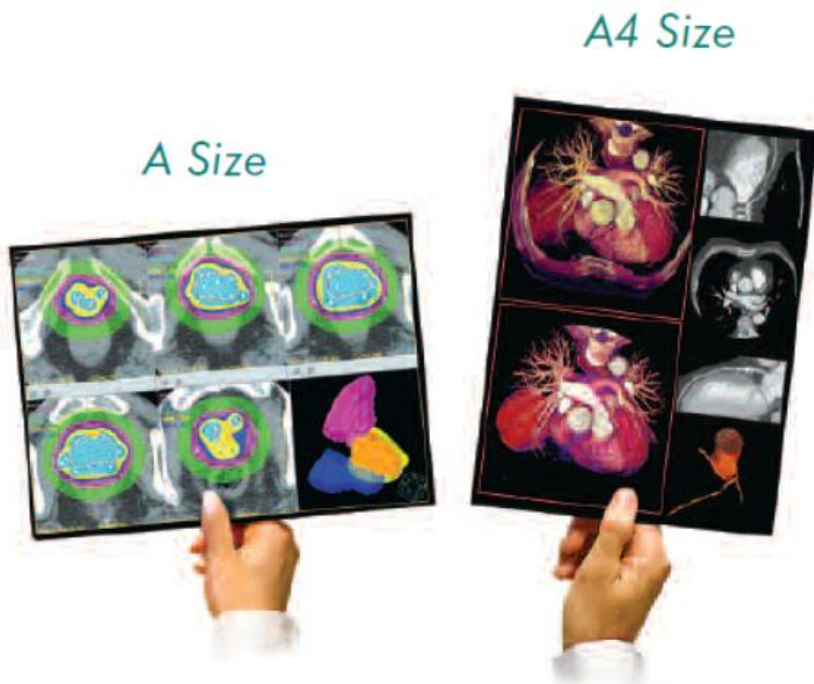


Codonics Chromavista®

Farebný papier

Codonics predstavil svetovo prvú farbu DICOM Imager a bol priekopnícky multi-mediálne termokamery viac ako desať rokov. Sme priemysel Leader vo farbe termokamery s viac ako 25 000 zariadení na celom svete.

Naša Horizon Multi-Media Imager ponúka ohromujúci Farebná tlač Edge-to-Edge, Maximalizácia zobrazovania veľkosti a znižovania odpadu. Codonics Exclusive Lekárske farby zodpovedajúce (MCM™) je pokročilý Funkcia spracovania obrazu, ktorá upravuje tlač výstupné farby presne zodpovedajú soft-Copy monitory. Tento proces opravuje rozdiely v Hue, sýtosť, a intenzitu medzi tlačiarňou a mäkkou kópiou skontrolovať stanice. Používateľ môže ľahko určiť najlepšiu zápas pre svoju obrazovku pomocou automatického Funkcia bracketing MCM, ktorá je zabudovaná do každého Codonics Imager.

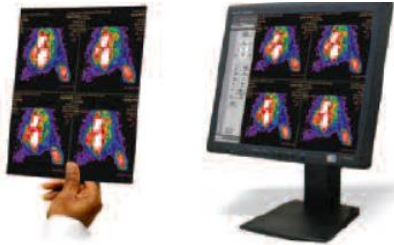

Farebné výtlačky vždy zodpovedajú softcopy monitory s našou exkluzívny Medicínske farebné párovanie (MCM™) funkcie. Konzistentnosť, jasnosť a sýtosť s Codonics farba farbivo-difúzna technológia ďaleko presahuje že voskové alebo atramentové tlačiarne.

Farebný papier ChromaVista má ťažký, Foto-hmotnosť základný materiál, ktorý odoláva vode a roztrhnutiu. Vzhľadom k tomu, že nie je atrament alebo toner, obrázky nikdy rozmazať alebo preniesť do rúk alebo iných výtlačkov.

Špecifikácie:

- Kompatibilné s programom horizont a NP/EP multi-mediálne termokamery
- Kontinuálne vykreslenie farebných tónov
- Dmin < 0,10 od, DMax > 2,500 od reflexné
- Hrúbka ~ 0,2 mm

Dostupné veľkosti:

Horizon

A (8,5 "x 11")
A4 (210mm x 297mm)
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130 USA
(440) 243-1198
(440) 243-1334 Fax
Email info@codonics.com
www.codonics.com

**Pre viac informácií kontaktujte Codonics na
800-444-1198 alebo 440-243-1198 a požiadajte o
Naše oddelenie predaja médií.**

* Chromavista farebný papier je k dispozícii pre použitie vo väčšine codonics imagers, niektoré model a veľkosť obmedzenia platia. Špecifikácie sú môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Kontaktujte svojho zástupcu Codonics pre najnovšie informácie. Copyright © 2005 Codonics, Inc. 900-311-001 Rev A