

Virtua® E

医学光盘制作系统




CODONICS

多媒体影像输出的领航者

Virtua® E

医学光盘制作系统

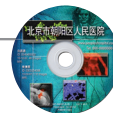

简介

Virtua E是一款为任何影像设备设计的完美、经济，又好用的医用全自动光盘输出设备。它集刻录医用、图像信息与制作精美的医院和病人信息资料封面等功能于一身。小巧精致的设计，内置高性能处理器，桌面触摸屏设计，可支持高速光盘封面标签打印机，其自动机械臂抓盘技术和友好的触摸屏界面为用户提供了更加便捷的操作从而提高工作效率。客户可以创建自己的定制标签或使用Codonics专为客户提供的光盘标签设计服务。

特性/优势

- 自动刻录和标记病人影像资料无需配备昂贵的工作站并可节约医院人力资源
- 可根据需求在影像工作站使用光盘中刻录的一个或多个Codonics或第三方DICOM专科图像浏览软件，来打开并浏览光盘上的影像数据^{注1}
- HL7和DICOM结构化报告可与相匹配的病人影像检查记录在同张光盘中^{注2}
- 一键触发语音式系统状态报告
- 直观的触摸屏可以让新手随时驾轻就熟
- 用户界面支持多种语言
- 可以设置自动备份功能，用以备份新的影像，并提供增量备份的索引，以便将来查询和灾难恢复时使用^{注2}
- 高度集成化设计，节约摆放空间
- 支持业界DICOM Part 10和HE PDI标准光盘格式，光盘创建日志符合HIPAA相关规范。

注1：部分专科浏览软件是选件
注2：选件功能

技术参数

光盘仓容量： 单个可存储20张空白光盘的光盘仓
 光盘收纳仓： 单仓，可收纳25张制作完成的光盘
 光盘驱动器： 单个CD/DVD驱动器
 刻录介质： CD-R, DVD-R
 封面标签打印： 喷墨
 打印分辨率： 最高可支持4800dpi
 墨盒： 一个彩色墨盒（CMY）
 操作界面： 独立15"液晶触摸屏，远程网页浏览器登陆操作
 输出效率^{注3}： 高达25 CD碟片/小时或 10 DVD/小时
 硬盘： 40 GB
 接口类别： 10/100M/1000M以太网（RJ-45）
 网络协议： DICOM本地存储（最高可接收24个外部设备数据传输）
 DICOM查询/获取（选件）
 HTTP远程访问服务（远程控制 and 设置）
 智能驱动器： USB闪存驱动器用于备份设置参数
 电源^{注4}： 100-240VAC, 50/60 Hz, 175W（工作状态）
 体积^{注4}： 26.7cm高, 46.2cm宽, 55.1cm长
 净重： 19.3 kg
 医用规范： 美国FDA一类设备准入声明和CE一类MDR 2017/745/EU(CE), GMP/QSR, ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016, 电器安全IEC 60601-1 (3.1版) 和EMC/EMI, FCC Class B类和IEC60601-1-2专业医疗机构(第四版)

注3：基于常用的临床检查数据量和网络条件
注4：显示器未含

触摸屏用户界面



地址：上海市长宁区仙霞路317号
远东国际大厦B栋1412室
邮编：200051
电话：+86 13918872504
电邮：info@codonics.com
网站：www.codonics.com
服务热线：800-820-8635

请速与我们联系，或访问我们的网站 www.codonics.com

所有注册和未注册的商标都属于各自相关的业主，本公司有权在不发布通知的情况下修改产品功能参数表。已申请美国专利号：www.codonics.com/ip/patents
本彩页于中国印制，版权所有© 2006-2021 Codonics, Inc. 9/2021

此型号配置的Virtua
产品不在美国销售
或使用。

